

Equipos 2024

# Pinxel

Radiofrecuencia fraccionada  
y microneedle

**DAS Medical Group**


Tecnología en movimiento al alcance de todos

# Pinxel

Tratamiento para mejorar la textura de la piel, eliminar manchas superficiales y mejorar el aspecto de las arrugas.

La energía de radiofrecuencia calienta la dermis a través de las puntas de las agujas, lo que estimula la proliferación de las fibras elásticas para el rejuvenecimiento.

La máquina de radiofrecuencia de Microaguja agrega vacío sobre la base original de la radiofrecuencia. El vacío absorbe la piel y luego la punción libera energía, puede evitar la energía desigual de la intrusión de la aguja en la piel debido a la elasticidad de la piel. El efecto del tratamiento es mejor que la radiofrecuencia ordinaria.

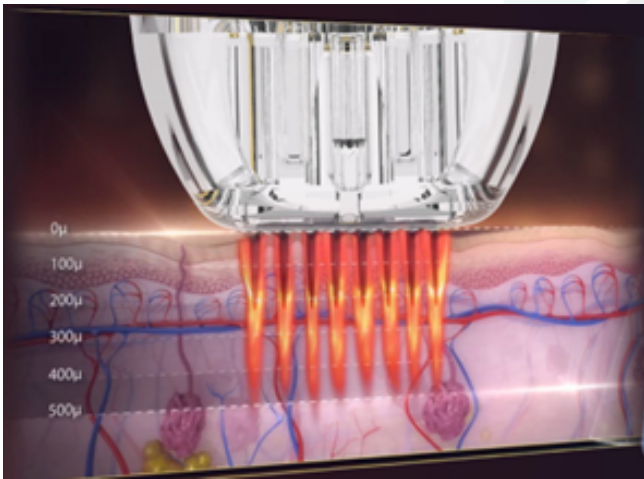

## Componentes

- Consola
- Pieza de mano de radiofrecuencia fraccionada)
- Pieza de mano de radiofrecuencia con microaguja
- Manipulo monopolar.

## Ventajas


- Sistema de vacumm
- Menos dolor
- Sistema de disparo automático
- Opción de agujas insulada y no insuladas
- Modo de tratamiento monopolar y bipolar.

## Otras aplicaciones

- Líneas finas
- Arrugas profundas
- Cicatrices de acné
- Tensado
- Reconstrucción de la piel
- Apariencia de los poros
- Estrías
- Cicatrices

## Radiofrecuencia microagujas y fraccionada

Los sistemas de RF fraccional inducen tanto la ablación como la coagulación. Pequeños pines se colocan en la superficie de la piel y emiten energía de radiofrecuencia hacia la epidermis. La energía de radiofrecuencia crea calor en la piel y al mismo tiempo realiza la ablación de pequeños canales de la epidermis mientras crea coagulación alrededor de los pequeños canales de ablación, estimulando una respuesta de curación de heridas. Todo esto se hace de forma fraccionada (en pequeños puntos), lo que tiene grandes efectos, pero no requiere mucho tiempo para que la piel sane.

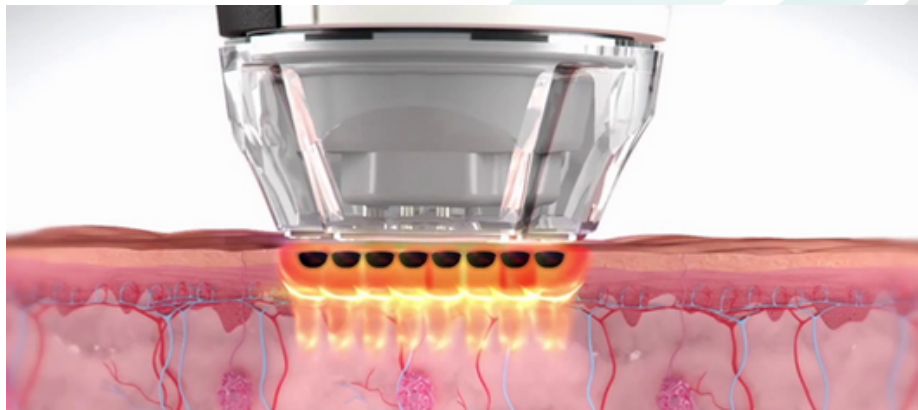

La radiofrecuencia fraccional con Microagujas es un sistema híbrido, en el que a través de las agujas se liberan corrientes de radiofrecuencia, produciendo columnas de daño térmico sin lesionar el tejido circundante, que induce remodelación dérmica, neoelastogénesis y neocolagénesis, segura para pieles oscuras



# Pixel



<b>Nombre</b>	PINXEL
<b>Tecnología</b>	RF fraccionada y microneedle
<b>Frecuencia</b>	2MHz
<b>Profundidad ajustable</b>	0.4-4mm
<b>Energía</b>	Nivel 1-10
<b>Duración del pulso</b>	10-900ms
<b>Consumible</b>	Tips
<b>Peso</b>	17,5 Kg
<b>Dimensiones</b>	51 x 35 x 109 cm



[instagram.com/dasmedical.cl](https://www.instagram.com/dasmedical.cl)



+56991907085